



Raccomandazioni per la **vestizione e svestizione** dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

VESTIZIONE



STEP 1
Valutare la necessità di indossare DPI; decidere dove indossare e togliere i DPI. Puoi essere aiutato da qualcuno? C'è uno specchio? Sai dove e come smaltire i DPI?




STEP 2
Togliere ogni monile e oggetto personale; praticare l'igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione alcolica; controllare l'integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri; indossare il camice monouso.



STEP 3A
Indossare uno schermo facciale.



STEP 3B
Indossare mascherina chirurgica e occhiali di protezione.

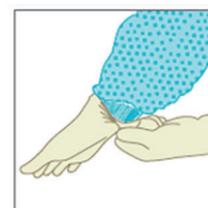


STEP 4
Indossare i guanti posizionando il bordo sopra il camice monouso.

NOTA: se si eseguono procedure che generano aerosol (ad esempio, aspirazione del tratto respiratorio, intubazione, broncoscopia, rianimazione cardiopolmonare, autopsia) usare respiratori FFP2 o equivalenti in combinazione con lo schermo facciale o una protezione oculare. Nel caso di utilizzo di respiratori di questo tipo, eseguire un controllo della tenuta (seal check).

COME INDOSSARE LA MASCHERA AD ALTA EFFICIENZA FFP2 ED EQUIVALENTI

Effettua un controllo della tenuta (seal check) prima di entrare nella stanza del paziente!

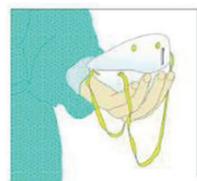

SEAL CHECK DI TIPO POSITIVO: espirare con forza, la comparsa di una pressione positiva all'interno del respiratore, significa che non ci sono perdite. In caso contrario, aggiustare la posizione del respiratore o la tensione degli elastici fino ad ottenere una tenuta corretta.

SEAL CHECK DI TIPO NEGATIVO: inspirare profondamente. In assenza di perdite la pressione negativa farà aderire il respiratore al viso e significa che non ci sono perdite. In caso contrario, aggiustare la posizione del respiratore o la tensione degli elastici fino ad ottenere una tenuta corretta.

SVESTIZIONE



STEP 1
Evitare la contaminazione di se stessi, degli altri e dell'ambiente; rimuovere l'equipaggiamento più contaminato per primo; **rimuovere guanti e camice;** rimuovere camice e guanti rivoltandoli dall'interno verso l'esterno; smaltire camice e guanti in maniera sicura.



STEP 2
Praticare l'igiene delle mani.



STEP 3A
Se si indossa maschera facciale rimuoverla partendo dalla nuca; smaltirla in maniera sicura.



STEP 3B
Se si indossa mascherina chirurgica e occhiali di protezione rimuovere gli occhiali dalla nuca; riporre gli occhiali in un contenitore separato per il re-processing; rimuovere la mascherina dalla nuca e smaltirla in sicurezza.



STEP 4
Praticare l'igiene delle mani.

